



Dokumentation nicht erfolgter Probenentnahmen

Inhalt

1. Zweck.....	2
2. Dokumentation zu einem Patient	2
3. Nachdokumentation zu mehreren Patienten gleichzeitig	4



1. Zweck

Konnte die Probenentnahme für ein DZHK Basisset und/oder Studienset nicht erfolgen, **obwohl kein Widerruf der Einwilligung vorliegt und es sich nicht um einen Screening Failure handelt**, kann dies unter Angabe des Grundes dokumentiert werden. Diese Angaben werden in den quartalsweisen “Klinischen Kennzahlen” der Studienzentren berücksichtigt und dienen ggf. auch der Optimierung des Probengewinnungsprozesses.

2. Dokumentation zu einem Patient


Schritt 1: Suchen des Patienten und Öffnen der Patientenakte

- Menüpunkt Patient → Patientensuche
- Eingabe LIMSPSN
- Markieren des gefundenen Patienten und Wechseln in die Patientenakte



Schritt 2: Messbefund anlegen

- Innerhalb der Patientenakte den Reiter “Messdaten” auswählen
- Über den Button in der rechten Seitenleiste einen Messbefund anlegen

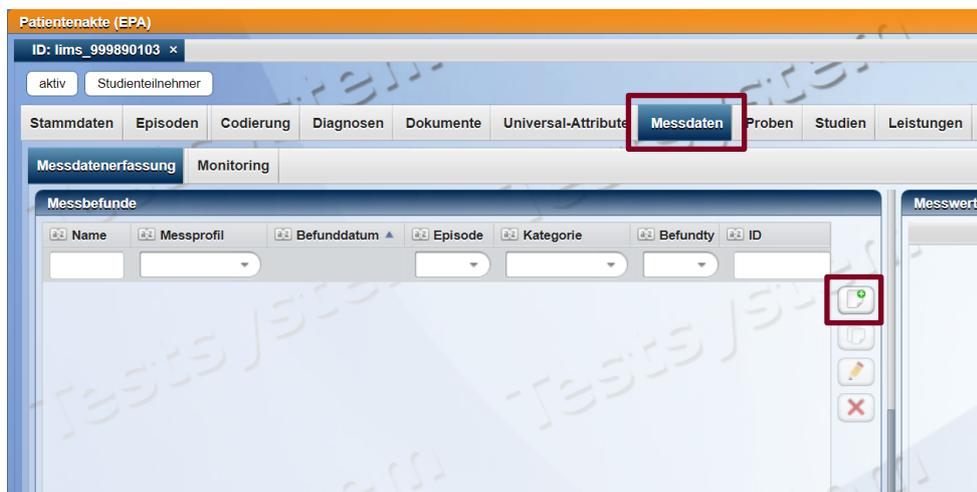

- Messprofil “Keine Probenentnahme” auswählen

Leitfaden-Titel: Dokumentation nicht erfolgter Probenentnahmen	Gültig ab: 09.08.2021
Version: V1.0	Seite 2 von 6



- Über den Button einen Namen für den Messfund generieren lassen
- In der rechten Bildschirmhälfte zutreffende Angaben tätigen und abspeichern

→ Wenn Sie den zutreffenden Grund nicht in der Liste finden, kontaktieren Sie biobanking@dzhk.de

Messbefund hinzufügen

Messprofil:
Keine Probenentnahme

Name:
Keine Probenentnahme_06.08.2021 14:4

Befunddatum:
06.08.2021 14:49 Exakt

Befundtyp:
Patient

ID:
[Empty field]

Episode:
Bitte wählen Sie...

Um welches Probenset handelt es sich?
 DZHK Basisset
 Studienset

Bei Auswahl Studienset: Geplanter Entnahmezeitpunkt - Datum
03.08.2021

Bei Auswahl Studienset: Geplanter Entnahmezeitpunkt - Visitenname
Baseline

Aus welchem Grund konnte die Entnahme nicht erfolgen?
Schlechter Gesundheitszustand des Patienten

Speichern Abbrechen

- Die Angaben wurden an dem Patienten gespeichert
- Der Messbefund kann bearbeitet oder wieder gelöscht werden

Patientenakte (EPA)

ID: lims_999890103 x ID: lims_392406865 x

aktiv Studenteteilnehmer

Stammdaten Episoden Codierung Diagnosen Dokumente Universal-Attribute Messdaten Proben Studien Leistungen Erweitert Benutzerzugriffe

Messdatenerfassung Monitoring

Messbefunde

Name	Messprofil	Befunddatum	Episode	Kategorie	Befundtyp	ID
Keine Probenentnahme 10:31:07	Keine Probenentnahme (Version: 4)	05.07.2021 10:31		Allgemein	Patient	

Messwerte

Keine Probenentnahme (05.07.2021 10:31)

Formularansicht


Messparameter	Wert	Einheit	Ref.
Probensets-3	DZHK Basisset		
Gründe	Schlechter Gesundheitszustand des Patienten		




3. Nachdokumentation zu mehreren Patienten gleichzeitig

Schritt 1: Suchen der Patienten und Öffnen der Mehrfachbearbeitung

- Menüpunkt Patient → Patientensuche
- Eingabe mehrerer LIMSPSN über Listen-Button

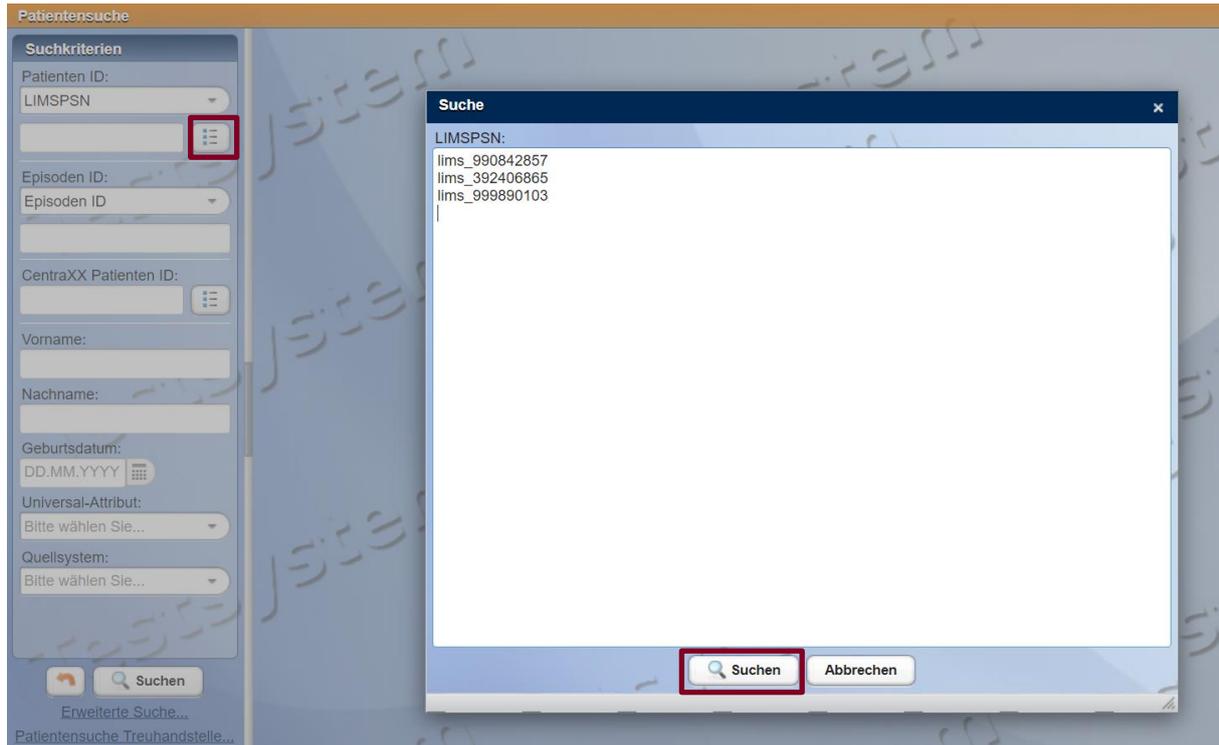

- Markieren der gefundenen Patienten und auf Merkliste setzen
- Starten der Mehrfachbearbeitung

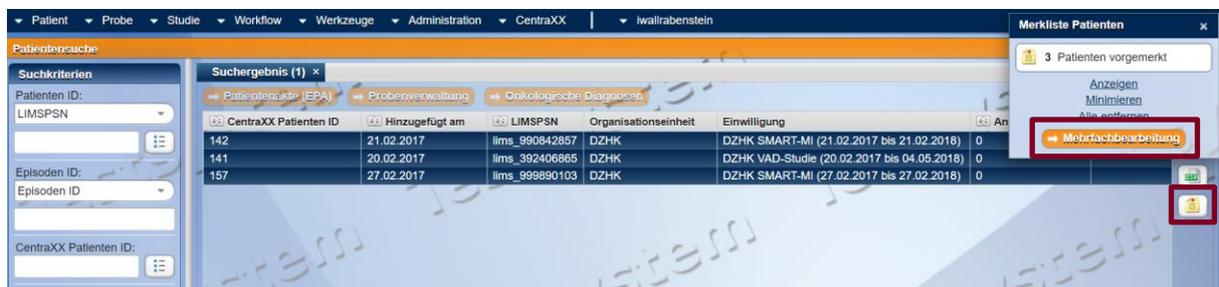

Schritt 2: Messbefund hinzufügen


Leitfaden-Titel: Dokumentation nicht erfolgter Probenentnahmen	Gültig ab: 09.08.2021
Version: V1.0	Seite 4 von 6



- Button zum Hinzufügen einer Dokumentation wählen



- Reiter Messbefund wählen und Befund hinzufügen über den Hyperlink

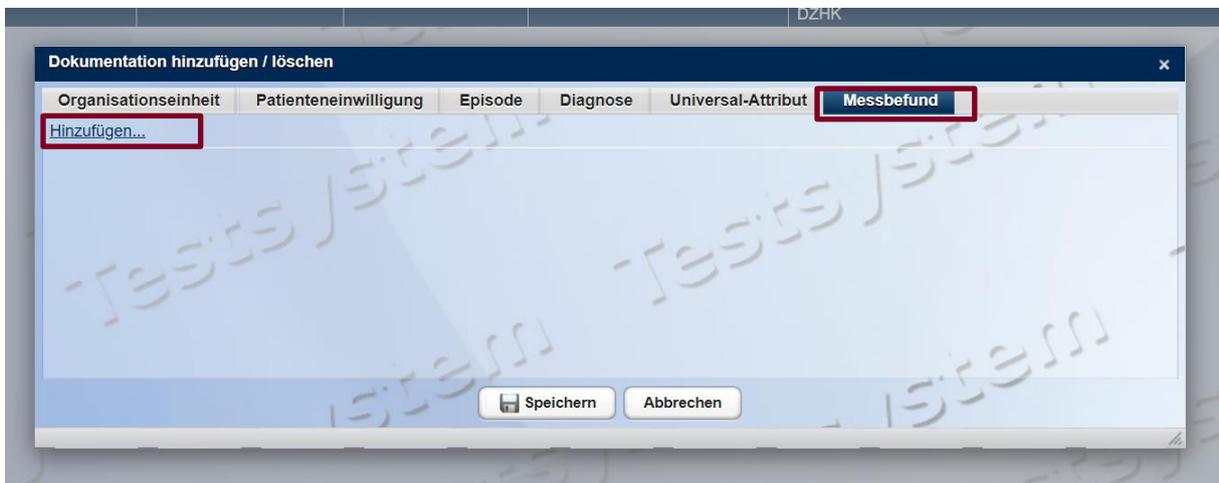

- Messprofil "Keine Probenentnahme" auswählen
- Über den Button einen Namen für den Messfund generieren lassen
- In der rechten Bildschirmhälfte die Angaben tätigen und abspeichern

→ Angaben werden für alle ausgewählten Patienten gesetzt

→ Es können nur Patienten mit dem gleichen Grund batchweise dokumentiert werden



Messbefund hinzufügen

Messprofil:
Keine Probenentnahme

Name:
Keine Probenentnahme_06.08.2021 14:4

Befunddatum:
06.08.2021 14:49 Exakt

Befundtyp:
Patient

ID:
[Empty field]

Episode:
Bitte wählen Sie...

Um welches Probenset handelt es sich?
 DZHK Basisset
 Studienset

Bei Auswahl Studienset: Geplanter Entnahmezeitpunkt - Datum
03.08.2021

Bei Auswahl Studienset: Geplanter Entnahmezeitpunkt - Visitenname
Baseline

Aus welchem Grund konnte die Entnahme nicht erfolgen?
Schlechter Gesundheitszustand des Patienten

Speichern Abbrechen

- Erfasster Messbefund wird angezeigt und kann für alle ausgewählten Patienten wieder entfernt oder abgespeichert werden

Dokumentation hinzufügen / löschen

Organisationseinheit Patienteneinwilligung Episode Diagnose Universal-Attribut **Messbefund**

Hinzufügen...

Keine Probenentnahme_05.07.2021 10:31:07 Entfernen

Speichern Abbrechen

- Die Angaben wurden an dem Patienten gespeichert
- Der Messbefund kann dann bei Bedarf in der Patientenakte bearbeitet oder wieder gelöscht werden (siehe Seite 3 unten)